


Nume pacient : _____

Client : _____



Înainte de inserția primei etape de tratament, este necesară amplasarea atașamentelor* (elementelor de ghidaj) conform schemei de mai jos:

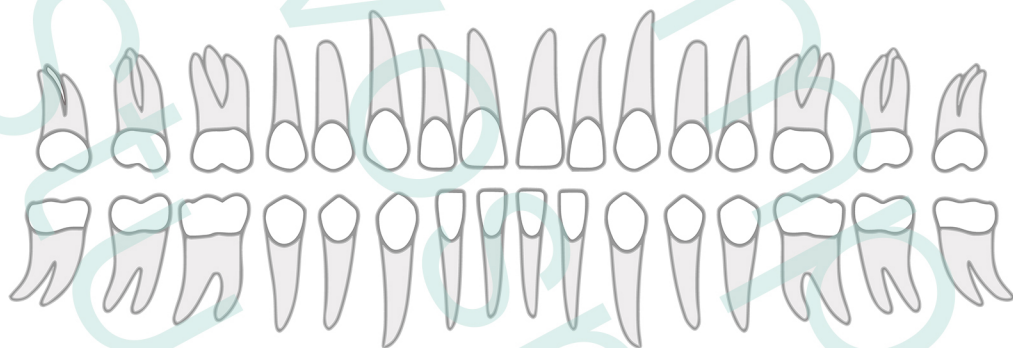


*Atașamentele sunt necesare pentru ca tratamentul să decurgă conform planificării. Amplasarea atașamentelor se efectuează folosind șablonul din recipientul marcat cu "0".
În lipsa unor indicații speciale, atașamentele se îndepărtează doar la finalul tratamentului.

Workflow amplasare atașamente



1. Testați compatibilitatea șablonului de transfer pe arcada pacientului. Șablonul trebuie să se potrivească perfect, singurele spații între șablon și dinți trebuie să fie cele prevăzute pentru atașamente.

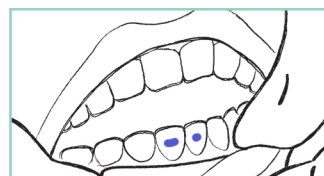

2. Îndepărtați șablonul și preparați suprafețele pe care urmează să fie amplasate atașamentele. Prepararea se face prin gravare acidă și aplicarea agentului de legătură (bonding).




3. Spațiile din șablon prevăzute pentru atașamente sunt umplute cu compozit.



4. Inserați și presați bine șablonul pe arcada dentară. Înlăturați eventualul exces de compozit prin presare, înainte de polimerizarea acestuia.



5. Compozitul se fotopolimerizează conform specificațiilor producătorului.

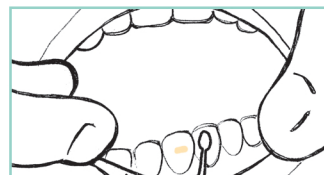

6. Înlăturați șablonul și îndepărtați eventualele surplusuri de compozit. Reinserați șablonul pentru a verifica dacă acesta se potrivește la fel ca în prima etapa a procesului.